

nosiboo^{*}eco[®]

Használati útmutató

Nosiboo ECO
szájjal szívható kivitelben – orrszívó eszköz



DMR-05/A04/2/V01



A készülék használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

 Gyártó: ATTRACT KFT.
H-7624 Pécs, Barbakán tér 5.

E-Mail: customerservice@nosiboo.com
Web: www.nosiboo.eu
Tel: +36 72 551 642

Figyelmeztető és biztonsági jelek – a készülék címkéjén és a használati útmutatóban az alábbi szimbólumokkal találkozhat:



A gyártó neve és címe



Olvassa el a használati útmutatót!



Figyelmeztetés

REF

Cikkszám (megrendelési szám)

LOT

Gyártási tételszám

Fontos biztonsági előírások

Figyelmeztetés: Ha az alábbi lehetséges veszélyes helyzeteket nem kerüljük el, akár végzetes baleset vagy a felhasználó sérülése is bekövetkezhet!

Általános használat – az eszköz kizárólag gyermekek orrváladékának kiszívására készült! Egyéb célokra nem használható! Az eszközt csak felnőtt személy használhatja! Ne hagyja az eszközt őrizetlenül gyermekek vagy csökkent testi/értelmi képességű emberek közelében! Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden egység megfelelően a helyére van csatlakoztatva! Ha az eszköz használata után a gyermek orrán allergiás kiütések, bőrpír jelenik meg, ne alkalmazza ismét az eszközt. Forduljon orvoshoz gyermekével!

Újrahasználat előtt – a Colibri fejet minden használat után fertőtlenítse! A tisztítás során szétszerelt Nosiboo ECO darabjait ne hagyja gyermek által hozzáférhető helyen, mert azokat a szájába veheti, lenyelheti!

Általános óvintézkedések – Olvassa el és kövesse a „Környezetvédelmi megjegyzések” című rész utasításait, ha az eszközt vagy annak bármely részét ki akarja dobni!

1. Felhasználási terület


A Nosiboo ECO szájjal szívható kivitelű orrszívó eszköz kizárólag a gyermekek orrváladékának kiszívására készült. A kiszíváshoz szükséges vákuum létrehozása (leválasztott kialakítással) szájjal történik.

Rendeltetési cél: a gyermekkori nátha hatására kialakuló szövődmények megelőzése és a betegség gyorsabb gyógyulásának elősegítése az orrváladék eltávolításával.

Kezelendő betegcsoport: azon gyermekek (jellemzően 4 évnél fiatalabbak), akik nem képesek orrfújással saját maguk az orrváladék eltávolítására.
Betegség, kezelésre szoruló állapot (indikáció): megfázásos náthás állapot és felülfertőzött melléküreges gyulladásának kiegészítő kezelése. **Olyan helyzetek, amelyekben nem alkalmazható az eszköz (kontraindikáció):** vérzékenység, orrsövény nyálkahártya tágult erei miatt – gyakori orrvérzéses panaszok esetén, vérhígító hatású készítmények alkalmazásának ideje alatt, veleszületett fejlődési rendellenesség esetén (pl. szájpadhasadék). **Tervezett felhasználó:** kor: 18 évnél idősebb felnőtt, nem: nem jellemző, ismeretek: a korára jellemző általános ismeretekkel rendelkezzen, iskolai végzettség: min. általános iskolai végzett, speciális szaktudásra a termék használatához nincs szükség.

2. Az eszköz bemutatása és üzembe helyezése – összeszerelés:

1. A Colibri fej elemeit tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és Karbantartás fejezetet)
2. Illessze bele a galléros szívócsövet a csatlakozóval ellátott szipkaburkolatba
3. Tegye a helyére a csatlakozó nélküli szipkaburkolatot
4. Nyomja az illeszkedő peremre a rugalmas szipkavéget
5. Csatlakoztassa a szívócső egyik végét a Colibri fej csatlakozójához
6. Csatlakoztassa a szívócső másik végét a szívócsonkhoz

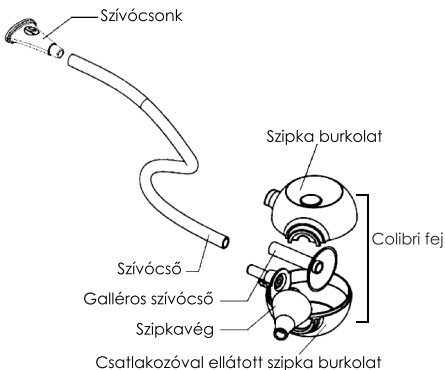

3. Az eszköz használata – A Nosiboo ECO akár 5 ml hígabb folyadékot is képes magában tartani. A beszívott váladék lecsapódik a szipka belső felületén, és a gondos tervezésnek köszönhetően nem tud kijutni a Colibri fej belsejéből. Ezzel külön szűrőbetét nélkül is biztonsággal megakadályozza, hogy az orrváladék a rugalmas összekötő csőbe, vagy az orrszívást végző személy szájába jusson. A csecsemőnél fekvő helyzetben, kisgyermekkortól stabil ülőhelyzetben tartva használja az eszközt. A szívócsonkot vegye a szájába, és az előzőleg fertőtlenített szipkavéget vezesse be az orrüregbe, kissé lefelé és a szemgolyó irányába kissé kifelé tolva. Ezen a ponton tartva finoman mozgathatja a szipkavéget, miközben szájjal szakaszos szívást végez a szívócsövön át. Ezzel a módszerrel elérhető az arcüregbe vezető nyílás, és nem sérül az orrkagyló nyálkahártyája vagy az orrsővény hajszálerei. A rugalmas összekötő cső csatlakozási pontja lefelé mutasson a használat közben. A beszáradt és nagyon sűrű orrváladék feloldásában segítenek a fiziológiás oldatok. Alkalmazásuk esetén 5 ml-nél nagyobb mennyiséget ne használjon. Az oldat bevitele után várjon néhány percet, az orrból kifolyt váladékot pl. egy papír zsebkendő segítségével távolítsa el, és csak ezután használja az eszközt. Az orrcseppet vagy más orvos által javasolt készítményt mindig az orrszívás után alkalmazza! Az orrszívás ideje 10-10 másodperc orrnyílásonként. Az eszközt naponta többször is használhatja, általános cél, hogy gyermeke nyugodt légzését biztosítsa. Javasolt használati gyakoriság: Indokolt esetben, napi 2-3-szor, alkalmanként 10 -10 másodperc, ébredés után, etetés és alvás előtt.

4. Tisztítás – Az eszköz tisztítása egyszerű, a csőről lehúzza a szipkavég lepattintása után a Colibri fej kétfelé nyitható. A szívócsonk tisztításához húzza le azt a szívócsőről. Ezután az alkatrészeket langyos csapvíz alatt mossa el, fertőtlenítő folyadékban áztatva fertőtlenítsé és szárítsa meg. Javasolt fertőtlenítőszer: Chicco Disinfectant.

5. Karbantartás és tárolás – Az eszközt száraz, portól és sérüléstől védett zárt helyen (pl. szekrényben) tárolja! Több gyermek esetében célszerű gyermekenként külön Colibri fejet használni, és külön, megkülönböztetve tárolni azokat. Ne tárolja sugárzó fűtőtest közelében!

6. Környezetvédelmi megjegyzések – A Nosiboo ECO szájjal szívható kivitelű eszköz nem jelent komolyabb környezeti kockázatot, ezért háztartási hulladékként elhelyezhető.

7. Műszaki adatok

Tömeg (csomagolás nélkül): 32 g

Tömeg (csomagolt egység): 105 g

Méret (Nosiboo ECO szél. x mag. x mély.): 85 x 40 x 75 mm

Méret (csomagolt egység szél. x mag. x mély.): 130 x 42 x 90 mm

Tervezett élettartam: 3 hónap