

**nosiboo<sup>\*</sup>eco**  
manual nasal aspirator

# Használati útmutató

Nosiboo ECO orrszívó



E-Mail: [customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)


Web: [www.nosiboo.eu](http://www.nosiboo.eu)

Tel: +36 72 551 642



**Gyártó: ATTRACT KFT.**  
7622 Pécs, Siklósi út 1/1.  
Made in EU



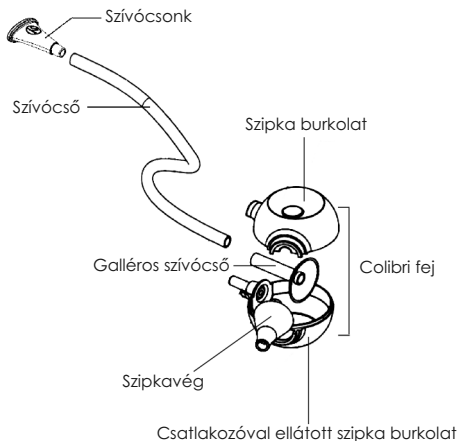

### **Biztonsági előírások**

Kerülje el az alábbi veszélyes helyzeteket, különben végzetes kimenetelű balesetet vagy sérülést okozhat

**Figyelmeztetés:** – Az eszköz kizárólag gyermekek orrváladékának kiszívására készült! A Colibri fejet minden használat után fertőtlenítsse! A tisztítás során szétszerelt Nosiboo ECO darabjait ne hagyja gyermek által hozzáférhető helyen, mert azokat a szájába veheti, lenyelheti! Az eszközt csak felnőtt személy használhatja! Ne hagyja az eszközt őrztelenül gyermekek vagy csökkent testi/értelmi képességű emberek közelében! Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden egység megfelelően a helyére van csatlakoztatva!

Ha az eszköz használata után a gyermek orrán allergiás kiütések, bőrpír jelenik meg, ne alkalmazza ismét az eszközt. Forduljon orvoshoz gyermekével! Ne használja az eszközt vérzékenység, orrsövény nyálkahártya tágult erei miatt – gyakori orrvézéses panaszok esetén, vérhígító hatású készítmények alkalmazásának ideje alatt, veleszületett fejlődési rendellenesség esetén (pl. szájpadhasadék).

## **1. Felhasználási terület**

Gyermekkori nátha hatására kialakuló szövődmények megelőzése és a betegség gyorsabb gyógyulásának elősegítése az orrvilágítás eltávolításával. Általában 4 év alatti gyermekek számára ajánlott, akik még nem tudják alaposan kifújni az orrukát. Az orrvilágítás leszíváshoz szükséges vákuumot a felhasználó hozza létre a saját tüdőjének erejével (a szabadalmaztatott kialakításnak köszönhetően, közvetett módon).

A csecsemőnél fekvő helyzetben, kisgyermekkorától stabil ülő helyzetben tartva használja az eszközt. A szívócsontot vegye a szájába, és az előzőleg fertőtlenített szipkavéget vezesse be az orrüregbe, kissé lefelé és a szemgolyó irányába kissé kifelé tolva. Ezen a ponton tartva finoman mozgathatja a szipkavéget, miközben szájjal szakaszos szívást végez a szívócsövön át. A rugalmas összekötő cső csatlakozási pontja lefelé mutasson a használat közben. A beszáradt és nagyon sűrű orrvilágítás feloldásában segítenek a fiziológiás oldatok. Alkalmazásuk esetén 5 ml-nél nagyobb mennyiséget ne használjon. Az oldat bevitele után várjon néhány percet, és csak ezután használja az eszközt. A Nosiboo ECO akár 5 ml hígabb folyadékot is képes magában tartani. A beszívott váladék lecsapódik a szipka belső felületén, és a gondos tervezésnek köszönhetően nem tud kijutni a Colibri fej belsejéből, így külön szűrőbetét nélkül biztonsággal használható.

## **2. Az eszköz bemutatása és üzembe helyezése – összeszerelés:**

1. A Colibri fej elemeit tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és Karbantartás fejezetet)
2. Illessze bele a galléros szívócsövet a csatlakozóval ellátott szipkaburkolatba
3. Tegye a helyére a csatlakozó nélküli szipkaburkolatot
4. Nyomja az illeszkedő peremre a rugalmas szipkavéget
5. Csatlakoztassa a szívócső egyik végét a Colibri fej csatlakozójához
6. Csatlakoztassa a szívócső másik végét a szívócsonkhoz

Az eszközt naponta többször is használhatja, általános cél, hogy gyermeke nyugodt légzését biztosítsa. Javasolt használati gyakoriság: Indokolt esetben napi többször, ébredés után, etetés és alvás előtt.

**3. Tisztítás és karbantartás** – A csőről lehúzva a szipkavég lepattintása után a Colibri fej kétfelé nyitható. A szívócsonk tisztításához húzza le azt a szívócsőről. Ezután az alkatrészeket langyos csapvíz alatt mossa el, fertőtlenítő folyadékban áztatva fertőtlenítse és szárítsa meg. Javasolt fertőtlenítőszer: Chicco Disinfectant. Az eszközt zárt helyen tárolja, tartsa távol közvetlen fénytől és sugárzó fűtőtesttől!

**4. Környezetvédelmi megjegyzések** – A Nosiboo ECO kézi orrszívó nem jelent komolyabb környezeti kockázatot, ezért háztartási hulladékként elhelyezhető.

## **5. Műszaki adatok**

Tömeg (csomagolt egység): 105 g

Méret (csomagolt egység szél. x mag. x mély.): 200 x 200 x 50 mm

Tervezett élettartam: 3 hónap